



VALIDACIÓN DE ALERGENOS

ANÁLISIS POR ACCUCLEAN

ADVANCED KIT (NEOGEN)



Utiliza guantes



El muestreo debe ser posterior a la limpieza antes de su sanitización

1.

Retire la parte del émbolo del dispositivo y coloque el extremo con la almohadilla en la superficie a probar



Para muestrear, entrecruce una porción de 10 X 10 cm de la superficie. Para obtener mejores resultados, muestre en un movimiento de ida y vuelta dentro del área de muestreo.





“Regrese el émbolo al cartucho y actíVELO”

Presionándolo completamente dentro del cartucho.

Agite el cartucho durante diez segundos y levante el embolo un poco para examinar el color de la solución restante usando el comparador de colores provisto.

2.

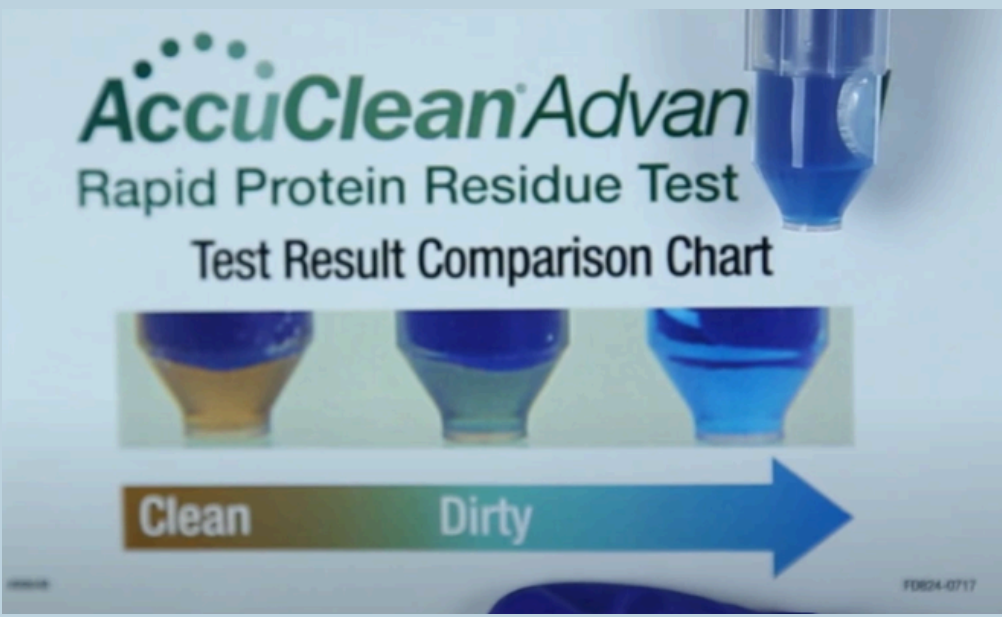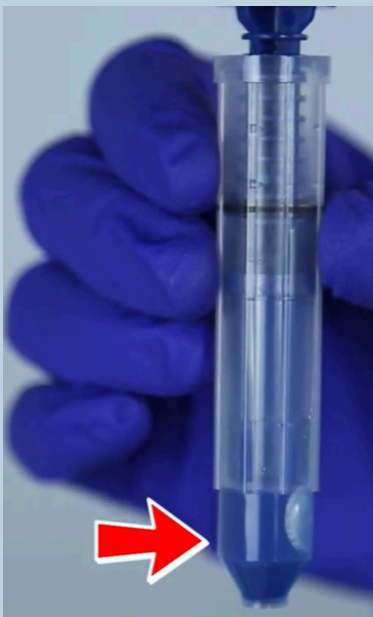

Si la solución contenida en la parte inferior de la copa del cartucho permanece:

Color cobre: "Negativo"

Color a gris (nivel bajo): Positivo

Color verde / azul o azul (nivel superior): Positivo

En resumen:



Fecha	Cambio	Responsable
11/06/2025	Creación de instructivo	Cecilia Guadalupe Gasca Ramirez