



VALIDACIÓN DE ALERGENOS



El muestreo debe ser posterior a la limpieza antes de su sanitización



Utiliza guantes

1




Rasgue/corte con cuidado la parte superior de la bolsita de buffer Tipo 8 y vierta todo su contenido en el tubo de muestra.

Retire un hisopo estéril del envase y humedézcalo con dos gotas de reveal 3D swab wetting solution
El muestreo estará calculado con base a la zona de aplicación del hisopo de aproximadamente 10 x 10 cm.

2




3

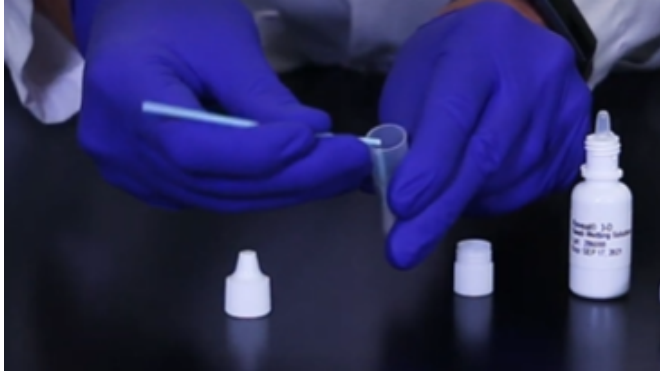


Devuelva el hisopo al buffer de extracción contenido en el tubo de muestra y, con cuidado, desprenda el extremo viscoso en la señal previamente marcada de modo que permanezca en el tubo.

Sujete la tapa del tubo de muestra, asegurándose de que el vástago no impida el sellado correcto del tubo. Agítelo durante 1 minuto

4

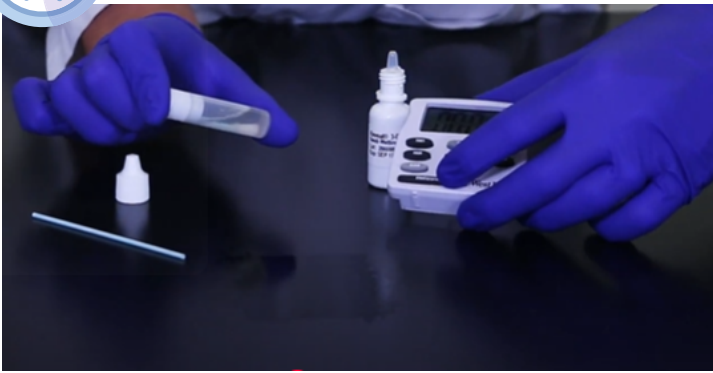


5

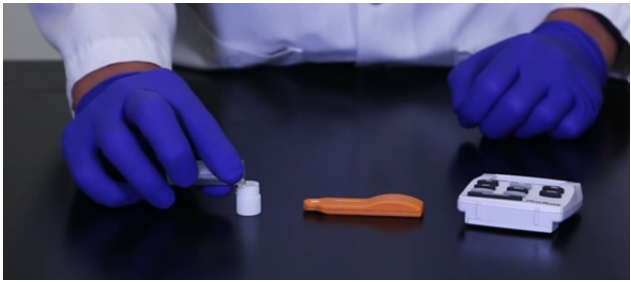

Sumerja el cabezal del dispositivo Reveal 3-D en el líquido de la tapa. Asegúrese de que la cavidad se sature del líquido . Deje la cavidad saturada hasta que vea circular el líquido en la ventanilla de análisis.


6

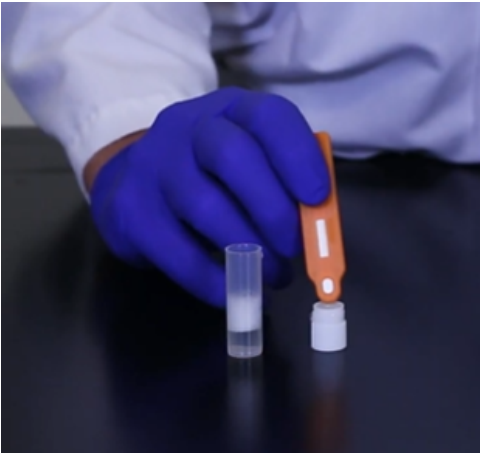

Coloque el dispositivo en una superficie plana y deje que el análisis se revele durante 5 minutos. lea el resultado 5 minutos después.



7

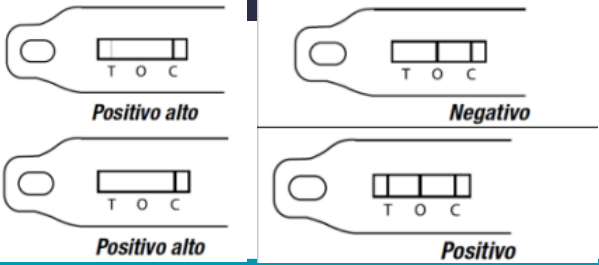

Fecha	Cambio	Responsable
06/06/2025	Creación de instructivo	Cecilia Guadalupe Gasca Ramirez